

パルスオキシメータ オキシマン S-104

OXiMAN
FINGER PULSE OXIMETER

OXiM

黒く美しきパルスオキシメータ
信頼のハイスペック MODEL
OXiMAN




カラーで見やすい有機ELディスプレイ採用

OXiMAN に採用された有機 EL ディスプレイは非常に応答速度が速く、刻々と変化する計測値を確実に表示させる信頼性があります。更にディスプレイの視野角は 180 度に限りなく近いので従来の液晶より容易に計測値を読み取ることができます。



フロントパネルの説明

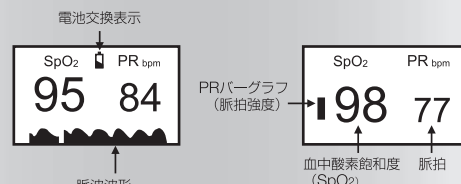


見る方向を選ばないマルチアングル機能

スイッチひとつで画面方向を切り替えて数値を読み易くするマルチアングルディスプレイを採用しています。脈拍の強さの表示は、波形モード2種とバーグラフモードの計3モードから選べユーザーニーズに応えます。



計測イメージ

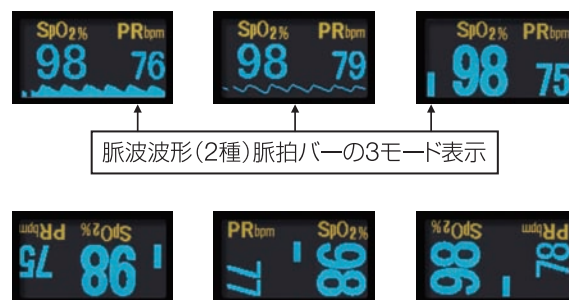

仕様

製品名／型番	OXiMAN オキシマン S-104		
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器		
測定方法	2波長吸光度法		
測定範囲	%SpO ₂	70～99%	
	脈拍数	30～235bpm (拍／分)	
測定精度	%SpO ₂	70～99%	±3%
	脈拍数	30～99bpm	±2bpm
		100～235bpm	±2%
使用電源	単4形アルカリ乾電池 2本		

外形寸法	縦58mm × 横32mm × 高さ37mm
重 量	約56g (電池を含む)
E M C	IEC60601-1-2 に適合
そ の 他	使用者が接触する部分の材質は、ISO10993-1、ISO10993-5、ISO10993-10 に準拠しており、毒性が無く、皮膚に対し影響を及ぼしません。
診療行為名称	経皮的動脈血酸素飽和度測定
医療機器認証番号	223ALBZX00015000
付 属 品	ストラップ1本、取扱説明書(保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池2本

製造販売元：



OXiM 株式会社

〒600-8023
京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338
京都四条河原町ビル2F
Tel: 075-353-1810 Fax: 075-342-2115

〒520-0852
滋賀県大津市田辺町2番45号
E-mail: support@oxim.co.jp